



Vozík HOP je podvozek, na který se umísťuje pomocí rychloupínacího zařízení trupová ortéza. Vozík umožňuje sklápět zádovou opěrkou o 40° dolů a sklápět celý sedací systém o 40° dolů. Sklápění a zajištění polohy sklopení zajišťuje plynová pružina, která se navrhuje podle skutečné hmotnosti uživatele. Vozík má vždy blatník pro ochranu rukou.


Veškeré parametry najdete v objednávkovém dotazníku, kde jsou uvedeny též příslušné kódy pro předpis u odborného lékaře.

1	polohovací rukojeť	
2	páka brzdy se zajištěním	
3	systém naklápění zádové opěrky	max 40°
4	nastavení stupačky	
5	plynová pružina	- síla pružiny se volí podle váhy uživatele - všechny pružiny bez rozdílu síly mají stejný rozměr



[rozměry v cm]

	šířka ortézy		34	36	38	40	42	45
1	šířka vozíku s koly		64	66	68	70	72	75
2 A	délka vozíku - <b>krátká verze</b>	celá stupačka	97	97	97	97	-	-
		půlená stupačka (+ 90 mm)	106	106	106	106	-	-
2 B	délka vozíku - <b>prodloužená verze</b>	celá stupačka	-	-	-	102	102	102
		půlená stupačka (+ 90 mm)	-	-	-	111	111	111

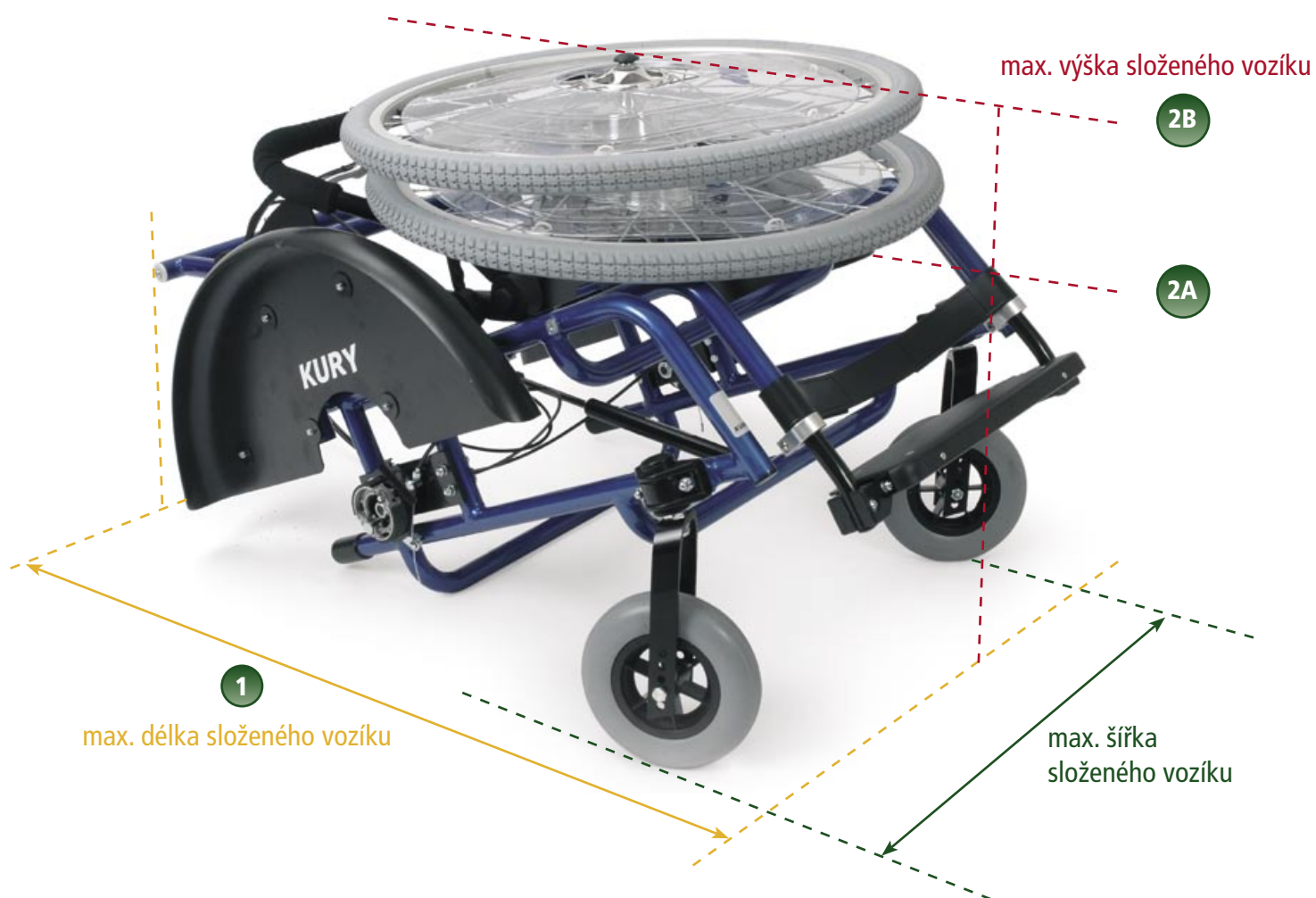

[rozměry v cm]

1	délka složeného vozíku	krátká verze		prodloužená verze	
		celá stupačka	půlená stupačka	celá stupačka	půlená stupačka
		105	114	110	119
2 A	výška složeného vozíku	54 - bez položených kol			
2 B	výška složeného vozíku	62 - viz obrázek - s položenými koly			



1	ovládání plynové pružiny	- sklápění vozíku
2	páka brzdy se zajištěním	



- zádová opěrka je sklopena cca 10°

1

slunečník

- není součástí vozíku
- lze ho objednat ve více barvách
- snadná demontáž



1 opěrky proti převrácení



- upínací zařízení montuje k ortéze výrobce vozíku HOP